

Brugsanvisning:

ArmGuard™ Patient Arm Protector

ArmGuard Classic Sled Kit

nr. 40004

Inkluderer:

nr. 40140 ArmGuard Standard Sled x 2

nr. 40240 ArmGuard Bariatric Sled x 2



**Brugsanvisninger på
alternative sprog:**

www.da-surgical.com/ifu



Instruktionsvideoer:

www.da-surgical.com/instructional-videos



INDHOLD

GENERELLE OPLYSNINGER	3
TILSIGTET ANVENDELSE	3
PRODUKTKOMPONENTER	4
ADVARSLER	5
OPSÆTNING	5, 6
RENGØRING	7
CE-ETIKET	8
SYMBOLFORKLARING	8

Rev. 11 5/1/22



TILSIGTET ANVENDELSE

ArmGuard Patient Arm Protector er beregnet til at sikre armen ved siden af en patient under operationen uden at "putte", beskytte armen mod kontakt med andet tilbehør, kontrollere medial kompression og give øjeblikkelig visuel og fysisk adgang til IV- og monitorlinjerne i tilfælde af nødsituationer uden at skulle trække armen ud.

ADVARSLER og FORSIGTIGHEDSREGLER

ADVARSEL – FARE FOR PERSONSKADE:

- Læs og forstå alle instruktioner, der præsenteres i denne manual, før du påsætter/fjerner ArmGuard.
- Før patienten placeres ved hjælp af ArmGuard, skal brugerne gennemføre træning i korrekt brug af ArmGuard.
- MÅ IKKE bruges, hvis ArmGuard-komponenter er beskadigede.
- Undersøg ALTID alle ArmGuard-komponenter før brug.
 - MÅ IKKE bruges, hvis VELCRO® Brand fastener* (fra nu af benævnt velcro) på slæde eller polstret armbeskytter fremstår slidt, afskallet eller beskadiget på nogen måde.
 - MÅ IKKE bruges, hvis nogen komponent har synlige skader eller slid.
- MÅ IKKE bruges til patienter, der vejer mere end 550 pund | 250 kg.
- MÅ IKKE bruges, hvis patienten, med armen/armene ved siden, er bredere end operationsbordet plus af ArmGuard-slædens/slædernes vandrette støtte. Patientarmen/-armene bør hvile inden for slædens vandrette vugge, IKKE på den hårde overflade af slædens opretstående kant.
- MÅ IKKE bruges, når bordet er leddelt i sidelæns vip.

ADVARSEL – INFEKTIONSFARE:

- ArmGuard puder til engangsbrug MÅ IKKE genbruges.
- Sørg ALTID for, at slæderne er rengjorte og tørre før brug.
- Nedsæk IKKE slæderne. Varmsteriliser IKKE slæderne.

PRODUKTKOMPONENTER

NUMMERKODE PÅ HVER DEL

1. ArmGuard Sled
(Sættet inkluderer bariatriske skæder og standardslæder)
2. ArmGuard Pack polstret armbeskytter – påkrævet til brug
(Fås i STANDARD eller BASIC – se detaljer nedenfor)
3. ArmGuard Width Extender – påkrævet til brug med patienter med højt BMI
(Fås i to størrelser – se detaljer nedenfor)




ArmGuard Bariatric Sleds (venstre)

- længere undermadrasforlænger til brug med breddeforlænger til større patienter
- modelnr. 40240

ArmGuard Standard Sled (højre)

- modelnr. 40140

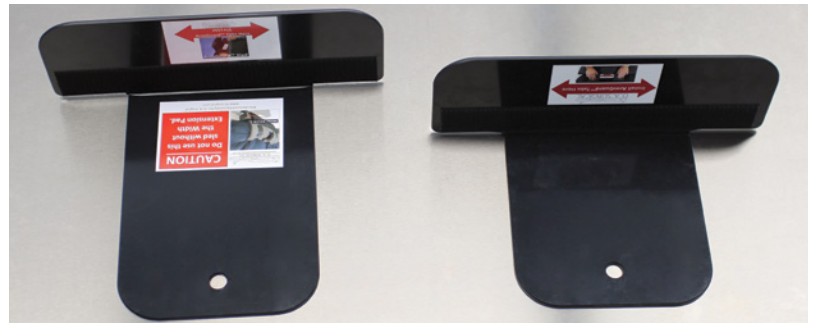


ArmGuard STANDARD (venstre)

- hver pakke indeholder to (2) polstrede armbeskyttere, 24" | 61 cm lang, til at omslutte og beskytte patientens fingre
- modelnr. 40401 (enkelt pakke), modelnr. 40412 (etui med 12 pakker)



ArmGuard BASIC (højre)

- hver pakke indeholder to (2) polstrede armbeskyttere, 20" | 51 cm lang
- modelnr. 40103 (enkelt pakke), modelnr. 40101 (etui med 12 pakker)

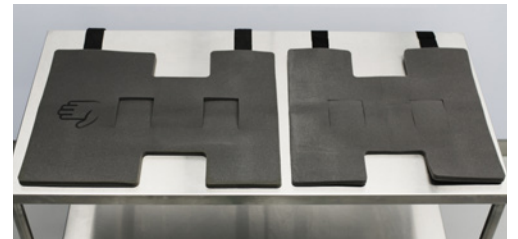


ArmGuard Width Extender

- hver pakke indeholder to (2) breddeforlængerpuder til bordmadrasser op til 3" | 7,6 cm
- modelnr. 40206 (enkelt pakke), modelnr. 40203 (etui med 12 pakker)



ArmGuard XL Width Extender

- hver pakke indeholder to (2) breddeforlængerpuder til bordmadrasser op til 4" | 10,2 cm
- modelnr. 40207 (enkelt pakke), modelnr. 40204 (etui med 12 pakker)

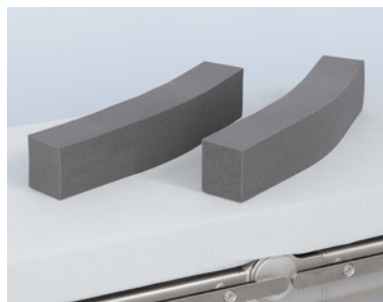

BRUGSANVISNING

Trin 1 – Vælg de passende ArmGuard Packs baseret på patientens anatomi og kirurgens præference:

- ArmGuard STANDARD – for alle patienter til fuldt ud at omslutte og beskytte patientens hænder og fingre.
- ArmGuard BASIC – til patienter med kortere arme eller til at efterlade patientens hånd blottet.

For en patient, der er bredere end operationsbordet, skal du vælge de passende breddeforlængerpuder baseret på madrastykkelsen:

- ArmGuard Width Extender – til bordmadrasser op til 3" | 7,6 cm.
- ArmGuard XL Width Extender – til bordmadrasser op til 4" | 10,2 cm.

Trin 2 – Åbn pakke(r), og inspicér ALLE komponenter

- Åbn pakke(r) mindst 10 minutter før brug.
- ArmGuard Packs kan lejlighedsvis miste deres forsegling og pustes op. De forbliver egnede til patientbrug.
- Hvis komponenterne ikke ser helt oppumpede ud efter 10 minutter, skal du åbne en ny pakke.
- Efterse alle komponenter for at kontrollere, at alle er til stede og ubeskadigede.
 - MÅ IKKE bruges, hvis velcroen på slæder eller puder fremstår slidt, afskallet eller beskadiget på nogen måde.



Trin 3 – Overfør patient til bord


- Overfør patienten til bordet på den sædvanlige måde, og placer som passende for proceduren.

BRUGSANVISNING (fortsat)

Trin 4 – Fastgør puden til slæden

- A. Vælg korrekt STANDARD-pude til højre eller venstre sidearm.
(BASIC-puder, som er kortere, kan udskiftes.)
- B. Placer ArmGuard-slæden på bordet.
- C. Placer puden på bordet med velcrosiden opad ved siden af slæden.
- D. Træk forsigtigt de to midterste firkanter op.
(Dette er "vedhæftningsfligene", der skal bruges til at fastgøre puden til slæden.)
- E. Vend fligene væk fra dig, og placer dem på bordet med velcrosiden nedad.
- F. Saml puden op med enderne foldet tilbage. Placer puden på slæden med velcrosiden nedad.
- G. Placer fligene tæt mod siden af slæden. Fastgør fligene på plads.

(Den længste ende af STANDARD ArmGuard-puden vil sigte mod den distale ende og patientens hånd. BASIC-puder har ikke en "lang" ende.)

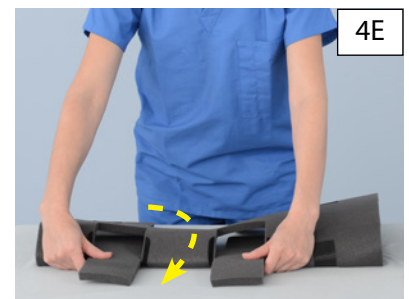

BRUGSANVISNING (fortsat)

Trin 5 – Placer breddeforlænger

- A. Hvis du bruger breddeforlænger (til patienter med arme, der strækker sig forbi kanten af operationsbordmadrassen), skal du indsætte den under armpuden, før du fastgør patientens arm.



Trin 6 – Træk slæden under bordmadrassen

BEMÆRK: Mens du skubber slæden ind under madrassen, skal du sikre dig, at armpuden bliver på toppen af madrassen.



Trin 7 – Fastgør patientens arm

- A. Indsæt armen.

(Den længste ende af STANDARD-puden skal dække og beskytte hånden. BASIC-puden kan efterlade fingrene blottede.)


- B. Vikl puden om armen, og fastgør velcro på begge dele af puden.

(For BASIC-puden kan du flytte slæden eller puden, hvis du ønsker at puden skal omslutte fingrene.)



BEMÆRK: Umiddelbar, praktisk adgang til IV-slange og -port uden behov for at trække patientens arm ud.

BEMÆRK: Puden genåbnes og lukkes let ved bedøvelse for linje adgang og justering osv.

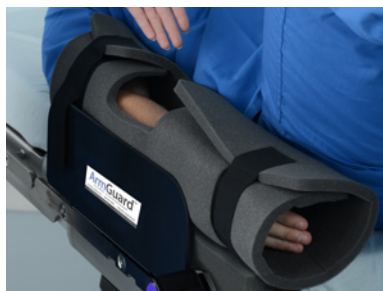

RENGØRING og OPBEVARING

Følg hospitalets rengørings-, hygiejne- og desinfektionsprotokol for bordtilbehør og velcro. Brug rengøringsmidler af hospitalskvalitet såsom Quaternary Ammonium Compound ("Quats") Germicidal Surface Disinfection/Deodorizing/Cleaning Wipe eller lignende til at fugte og tørre genbrugelige komponenter af.

Vær særlig opmærksom på områder, hvor væskemigration kan forekomme. Fnug og fiberpartikler kan fjernes fra velcro med en TrenGuard Cleaning Brush (modelnr. 9106), også nyttig til ArmGuard.

 MÅ IKKE nedsænkes i væske.
MÅ IKKE varmesteriliseres.

Efter desinficering og tørring skal ArmGuard Sleds opbevares på et sikkert sted for at forhindre skader. Opbevares ved stuetemperatur. Undgå at udsætte ArmGuard-komponenter for ekstreme temperaturer.

RESERVEDELE OG SERVICE

D. A. Surgical garanterer, at vores produkter vil være fri for fabrikationsfejl i en periode på 12 måneder efter levering til slutbrugeren.

Brugbar levetid for ArmGuard Sleds er 3 år med periodisk vedligeholdelse af kroglukkemekanisme.

Alle andre komponenter er kun til engangsbrug.

Kontroller altid velcroens integritet på ArmGuard Sleds før brug. Hvis velcroen begynder at skalle af, krybe eller fremstår slidt, skal velcroen udskiftes. Kontakt D. A. Surgical for servicemuligheder.

Hvis skumpuderne ikke puster helt op efter 10 minutter, skal du åbne en ny pakke og kontakte D. A. Surgical for at få en udskiftning.

Hvis du er usikker på ArmGuard brugbare stand, kontaktes DA Kirurgisk straks på CustomerService@da-surgical.com eller 001 (800) 261-9953.

ANSVARFRASKRIVELSE

DA Surgical påtager sig intet ansvar som følge af misbrug eller forkert anvendelse af ArmGuard.

Det er udelukkende brugerens og personalets ansvar at bestemme anvendeligheden af enheden til dens brug, og at studere og grundigt forstå disse brugsanvisninger og bruge ArmGuard korrekt.


Kontakt D. A. Surgical for at få oplysninger om mulighederne for service på stedet.

D. A. Surgical forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer i design, specifikationer og modeller.







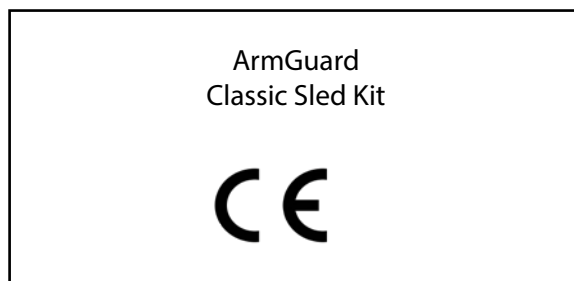



BEMÆRK

Rapporter enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med denne enhed, til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

CE-ETIKET



SYMBOLFORKLARING

 MD MEDICINSK UDYTYR	 SE BRUGSANVISNING
 INDIKERER EN POTENTIEL RISIKO	 MÅ IKKE GENBRUGES
 LOT BATCHKODE/LOTNUMMER	 SN SERIENUMMER
 FABRIKANT	 FREMSTILLINGSDATO
 OVERENSSTEMMELSESMÆRKE	 EC REP AUTORISERET REPRÆSENTANT I DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB