

Bruksanvisning:

ArmGuard™ Patient Arm Protector

ArmGuard Classic Sled Kit

#40004

Innhold:

#40140 ArmGuard Standard Sled x 2

#40240 ArmGuard Bariatric Sled x 2



**Bruksanvisninger på
alternative språk:**

www.da-surgical.com/ifu



Instruksjonsvideoer:

www.da-surgical.com/instructional-videos



INNHold

GENERELL INFORMASJON	3
TILTENKT BRUK	3
PRODUKTKOMPONENTER	4
ADVARSLER	5
OPPSETT	5, 6
RENGJØRING	7
CE-MERKET	8
SYMBOLFORKLARING	8

Rev. 11 5/1/22



TILTENKT BRUK

ArmGuard Patient Arm Protector er ment å sikre armen ved siden av en pasient under operasjonen uten «pakke inn», beskytte armen mot kontakt med annet tilbehør, kontrollere kompresjon medialt og gi umiddelbar visuell og fysisk tilgang til IV- og monitorslangene i nødstilfeller uten å måtte løsne armen.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

ADVARSEL – FARE FOR PERSONSKADE:

- Les og forstå alle instruksjonene i denne håndboken før du fester/fjerner ArmGuard.
- Før de posisjonerer pasienten ved bruk av ArmGuard, må brukere fullføre opplæring i riktig bruk av ArmGuard.
- MÅ IKKE brukes hvis ArmGuard-komponentene er skadet.
- Inspiser ALLTID alle ArmGuard-komponenter før bruk.
 - MÅ IKKE brukes hvis VELCRO®-borrelåsen* (fra nå av kalt borrelås) på slede eller polstret armbeskytter er slitt, avskaller eller virker skadet på noen måte.
 - MÅ IKKE brukes hvis noen komponent har synlig skade eller slitasje.
- MÅ IKKE brukes med pasienter som veier mer enn 550 lb | 250 kg.
- MÅ IKKE brukes hvis pasienten, med armen(e) ved siden, er bredere enn operasjonsbordet pluss horisontal støtte av ArmGuard-sleden(e). Pasientarm(er) skal hvile innenfor den horisontale krybben til sleden, IKKE på den harde overflaten av sledens oppreiste kant.
- Må IKKE brukes når bordet brukes med sidetilt.

ADVARSEL – INFEKSJONSFARE:

- ArmGuard-puter til engangsbruk MÅ IKKE gjenbrukes.
- Sørg ALLTID for at sledene er rengjort og tørket før bruk.
- IKKE senk sleder i vann. Sleder MÅ IKKE varmesteriliseres.

PRODUKTKOMPONENTER

NUMMERKODE PÅ HVER DEL

1. ArmGuard Sled
(kitet inkluderer bariatrisk og standard slede)
2. ArmGuard Pack polstret armbeskytter – kreves for bruk (tilgjengelig i STANDARD eller BASIC – se detaljer nedenfor)
3. ArmGuard Width Extender – nødvendig for bruk med pasienter med høy BMI
(tilgjengelig i to størrelser – se detaljer nedenfor)




ArmGuard Bariatric Sleds (venstre)

- lengre under madrassforlengelse for bruk med breddeelement for større pasienter
- modell #40240

ArmGuard Standard Sled (høyre)

- modell #40140

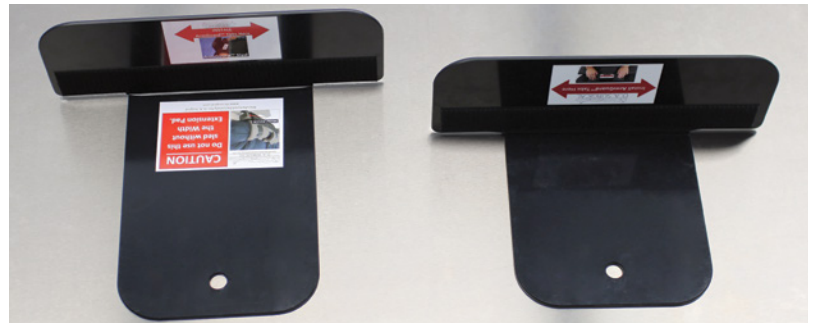

ArmGuard STANDARD (venstre)

- hver pakke inneholder to (2) polstrede armbeskyttere, 24 in | 61 cm lange, for å omslutte og beskytte pasientens fingre
- modell #40401 (enkeltpakke), modell #40412 (eske med 12 pakker)



ArmGuard BASIC (høyre)

- hver pakke inneholder to (2) polstrede armbeskyttere, 20 in | 51 cm i lengde
- modell #40103 (enkeltpakke), modell #40101 (eske med 12 pakker)




ArmGuard Width Extender

- hver pakke inneholder to (2) breddeelement-puter for bordmadrasser på opptil 3 in | 7,6 cm
- modell #40206 (enkeltpakke), modell #40203 (eske med 12 pakker)



ArmGuard XL Width Extender

- hver pakke inneholder to (2) breddeelement-puter for bordmadrasser på opptil 4 in | 10,2 cm
- modell #40207 (enkeltpakke), modell #40204 (eske med 12 pakker)

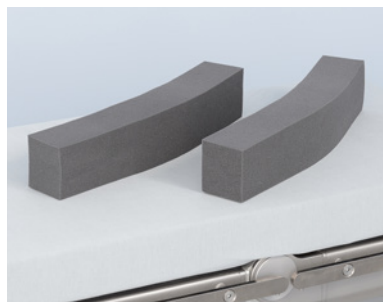

BRUKSANVISNING

Trinn 1 – Velg passende ArmGuard Packs basert på pasientens anatomi og kirurgens preferanser:

- ArmGuard STANDARD – for alle pasienter for å omslutte og beskytte pasientens hender og fingre fullstendig.
- ArmGuard BASIC – for pasienter med kortere armer eller for å la pasientens hånd være eksponert.

For en pasient som er bredere enn operasjonsbordet, velg passende breddeelement-puter, basert på madrassykkelsen:

- ArmGuard Width Extender – for bordmadrasser på opptil 3 in | 7,6 cm.
- ArmGuard XL Width Extender – for bordmadrasser på opptil 4 in | 10,2 cm.

Trinn 2 – Åpne pakken(e) og inspiser ALLE komponenter

- Åpne pakke(r) minst 10 minutter før bruk.
- ArmGuard Packs kan av og til miste forseglingen og blåses opp. De er egnet til bruk for pasienter.
- Hvis komponentene ikke ser helt oppblåste ut etter 10 minutter, åpne ny pakke.
- Inspiser alle komponenter for å bekrefte at alle er til stede og uskadet.
 - MÅ IKKE brukes hvis borrelås på sleder eller puter er slitt, avskaller eller virker skadet på noen måte.



Trinn 3 – Overfør pasienten til bordet

- Overfør pasienten til bordet på vanlig måte og plasser den slik det passer for prosedyren.

BRUKSANVISNING (fortsatt)

Trinn 4 – Fest puten til sleden

A. Velg riktig STANDARD pute for høyre eller venstre sidearm.
(BASIC-puter, som er kortere, kan byttes ut.)

B. Plasser ArmGuard-sleden på bordet.

C. Legg puten på bordet med borrelåssiden opp, ved siden av sleden.

D. Trekk forsiktig opp de to midterste kvadratene.


(Dette er «hefteklaffene» som skal brukes til å feste puten til sleden.)

E. Snu klaffene bort fra deg og plasser dem på bordet med borrelåssiden ned.

F. Ta opp puten med endene foldet tilbake. Plasser puten på sleden med borrelåssiden ned.

G. Plasser klaffene tett inntil siden av sleden. Fest klaffene på plass.

(Den lengste enden av STANDARD ArmGuard-puten vil sikte mot den distale enden og pasientens hånd. BASIC-puter har ikke en «lang» ende.)

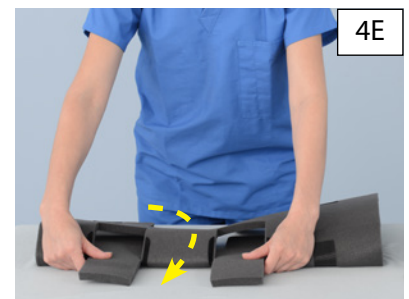

BRUKSANVISNING (fortsatt)

Trinn 5 – Plasser breddeelement

- A. Hvis du bruker breddeelement (for pasienter med armer som strekker seg forbi kanten av bordmadrassen), sett den inn under armputen før du fester pasientens arm.



Trinn 6 – Skyv slede under bordmadrass

MERK: Mens du skyver sleden under madrassen, må du sørge for at armputen forblir på toppen av madrassen.



Trinn 7 – Sikre pasientens arm

- A. Sett inn arm.

(Den lengste enden av STANDARD-puten skal dekke og beskytte hånden. BASIC-puten kan etterlate fingrene blottlagt.)

- B. Vikle puten rundt armen og fest borrelås på begge deler av puten.

(For BASIC-puten kan du flytte sleden eller puten hvis du vil at puten skal omslutte fingrene.)



MERK: Umiddelbar, praktisk tilgang til IV-slange og -port uten å måtte løsne pasientens arm.

MERK: Puten kan enkelt åpnes og lukkes igjen med anestesi for slangetilgang og justering, osv.



RENGJØRING og OPPBEVARING

Følg sykehusets rengjørings-, hygiene- og desinfeksjonsprotokoll for bordtilbehør og borrelås. Bruk rengjøringsmidler av sykehuskvalitet, for eksempel Quaternary Ammonium Compound ("Quats") Germicidal Surface Disinfection/Deodorizing/Cleaning Wipe eller lignende for å fukte og tørke av gjenbrukbare komponenter.

Vær spesielt oppmerksom på områder hvor væskemigrering kan forekomme. Lo- og fiberpartikler kan fjernes fra borrelåsen med en TrenGuard Cleaning Brush (modell #9106), også nyttig for ArmGuard.



IKKE senk i vann.

Den MÅ IKKE varmesteriliseres.

Etter desinfisering og tørking, skal ArmGuard Sleds oppbevares på et sikkert sted for å forhindre skade. Oppbevares ved romtemperatur. Unngå å utsette ArmGuard-komponenter for ekstreme temperaturer.

RESERVEDELER og SERVICE

DA Surgical garanterer at produktene våre vil være frie for produksjonsfeil i en periode på 12 måneder etter levering til sluttbruker.

Levetiden til ArmGuard Sleds er 3 år med periodisk vedlikehold av borrelåsfeste.

Alle andre komponenter er kun til engangsbruk.

Sjekk alltid integriteten til borrelåsen på ArmGuard Sleds før bruk. Hvis borrelåsen begynner å avskalle, krype eller virker slitt, må borrelåsen skiftes ut. Kontakt DA Surgical for servicealternativer.

Hvis skumputene ikke blåses helt opp etter 10 minutter, åpne en ny pakke og kontakt DA Surgical for en erstatning.

Hvis du er usikker på om ArmGuard er i brukbar tilstand, kontakt DA Surgical umiddelbart på CustomerService@da-surgical.com eller 001 (800) 261-9953.

ANSVARFRASKRIVELSE

DA Surgical påtar seg intet ansvar som følge av misbruk eller feil bruk av ArmGuard.

Det er ene og alene brukerens og personalets ansvar å bestemme om enheten er egnet til bruk, og å studere og grundig forstå denne bruksanvisningen og bruke ArmGuard riktig.


Kontakt DA Surgical for alternativer under bruk.

DA Surgical forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i design, spesifikasjoner og modeller.







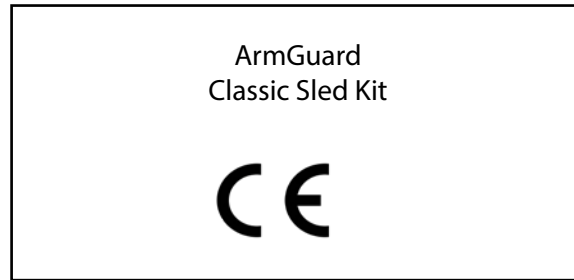



MERKNAD

Rapporter enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med denne enheten til produsenten og pågjørende myndighet i landet der brukeren og/eller pasienten har fast tilholdssted.

CE-ETIKETT



FORKLARING AV SYMBOLER

 MD MEDISINSK UTSTYR	 SE BRUKSANVISNINGEN
 ANGIR EN POTENSIELL RISIKO	 MÅ IKKE BRUKES PÅ NYTT
 LOT BATCH CODE / LOT NUMBER	 SN SERIENUMMER
 PRODUSENT	 PRODUKSJONSDATO
 SAMSVARSMERKE	 EC REP AUTORISERT REPRESENTANT I EU